

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> 2 DISPERSIVE<sup>®</sup> BLEACH**

*Die Zirkonzahn Kultur*




## PRETTAU® 2 DISPERSIVE® BLEACH로 만든 풀 지르코니아 수복물

### 아노다이징한 티타늄 베이스 위에 프레스코 세라믹으로 치은부 축성

풀 지르코니아 수복물은 밀링 후 제거 가능한 치은과 함께 디지털화된 2개의 모델을 기반으로 계획되었습니다. 이를 위해 Zirkonzahn.Modifier 소프트웨어에서 초기 가상 치아 배열을 진행했으며 자연치 라이브러리 "Heroes Collection"의 치아 모양을 개별화했습니다. "Heroes Collection"의 치아에 제공되는 가상 마킹 기능 덕분에 치은이 소프트웨어에서 자동으로 생성될 수 있습니다.

그 다음 Bleach 0M1 셰이드의 Prettau® 2 Dispersive® 지르코니아에 네스팅하고 M2 Dual Teleskoper 밀링기로 밀링했습니다. 이 지르코니아는 매우 우수한 굴곡 강도와 투명도를 특징으로 하며 이미 자연스러운 색상 그라데이션이 적용되어 있습니다. PRETTAU® AQUARELL INTENSIV 컬러 리퀴드로 개별적인 색상 효과를 표현했습니다.

소결 후, 치은 부위는 Fresco Gingiva 세라믹 페이스트로 축성되었습니다. 티타늄 베이스를 접착하기 전에 황금색으로 아노다이징 처리를 했습니다. 황금빛 색조는 그레이 밸류를 감소시켜 지르코니아 구조물 아래에서 티타늄 베이스가 비쳐나오는 것을 최소화합니다.

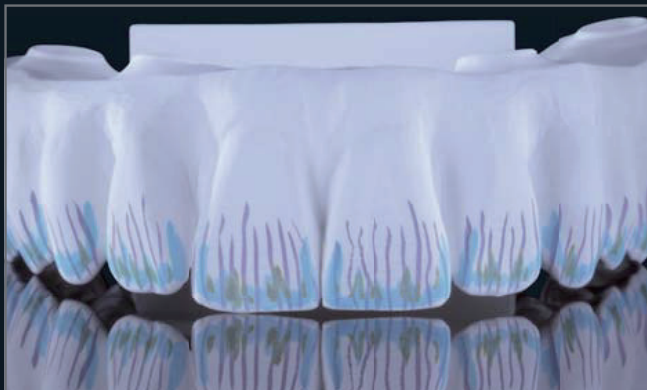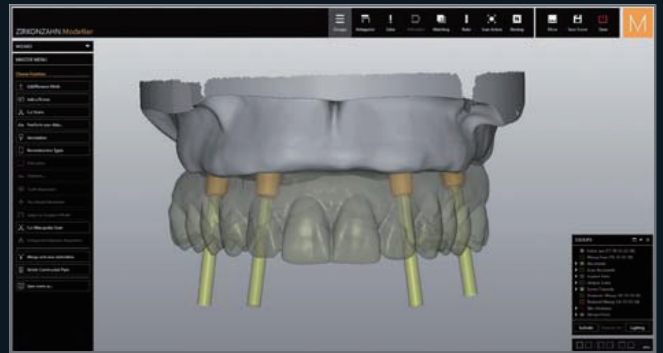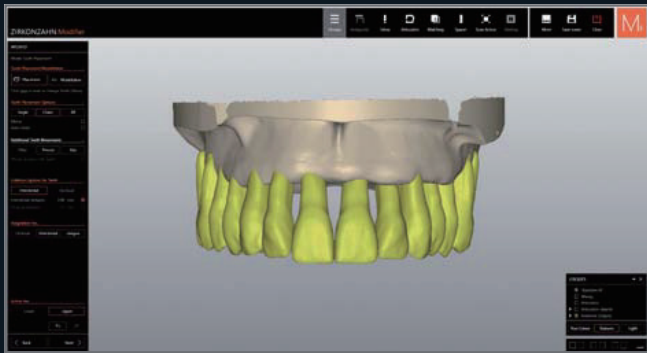

# 100% 단일 디자인, 치은 부위에만 축성

*ZT Janka Gregorics – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien*






## PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- 특히 높은 투명도와 뛰어난 굴곡 강도를 지닌 자연스러운 색상 그라데이션의 컬러 지르코니아
- 풀 지르코니아 브리지에 특히 적합하지만 싱글 크라운, 인레이, 온레이, 베니어, 바 및 브릿지 (수축용 또는 해부학적)에도 제한 없이 사용 가능
- 단일 디자인으로 세라믹 치핑이 없고 대합치 마모 없음
- 필요시 PRETTAU® AQUARELL INTENSIV 컬러 리퀴드, ICE 세라믹, Fresco 세라믹 및 ICE 3D 스테인으로 개별적인 특징 표현
- 3가지 블리치 셰이드 제공 가능



Prettau® 2 Dispersive® Bleach 0M1

Bleachtöne

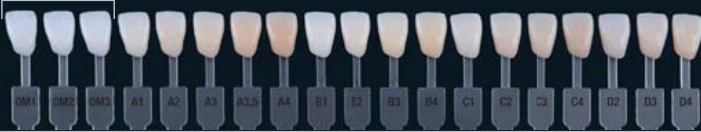

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

**NEW! 텔레스코퍼 오르빗 (Ø 125 mm)**

M2 밀링기에 장착 가능한 4가지 블록 크기



VIDEO  
ANSCHAUEN

